

Щековая дробилка Changsha Mitr Instrument Equipment



**ПРОСТОТА
В ОБРАЩЕНИИ**

**4 ВАРИАНТА
ИСПОЛНЕНИЯ**

БЕЗОПАСНОСТЬ

Запатентованная технология
шумоподавления




АССГ



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634012, г. Томск, ул.
Елизаровых 53/2, оф. 804

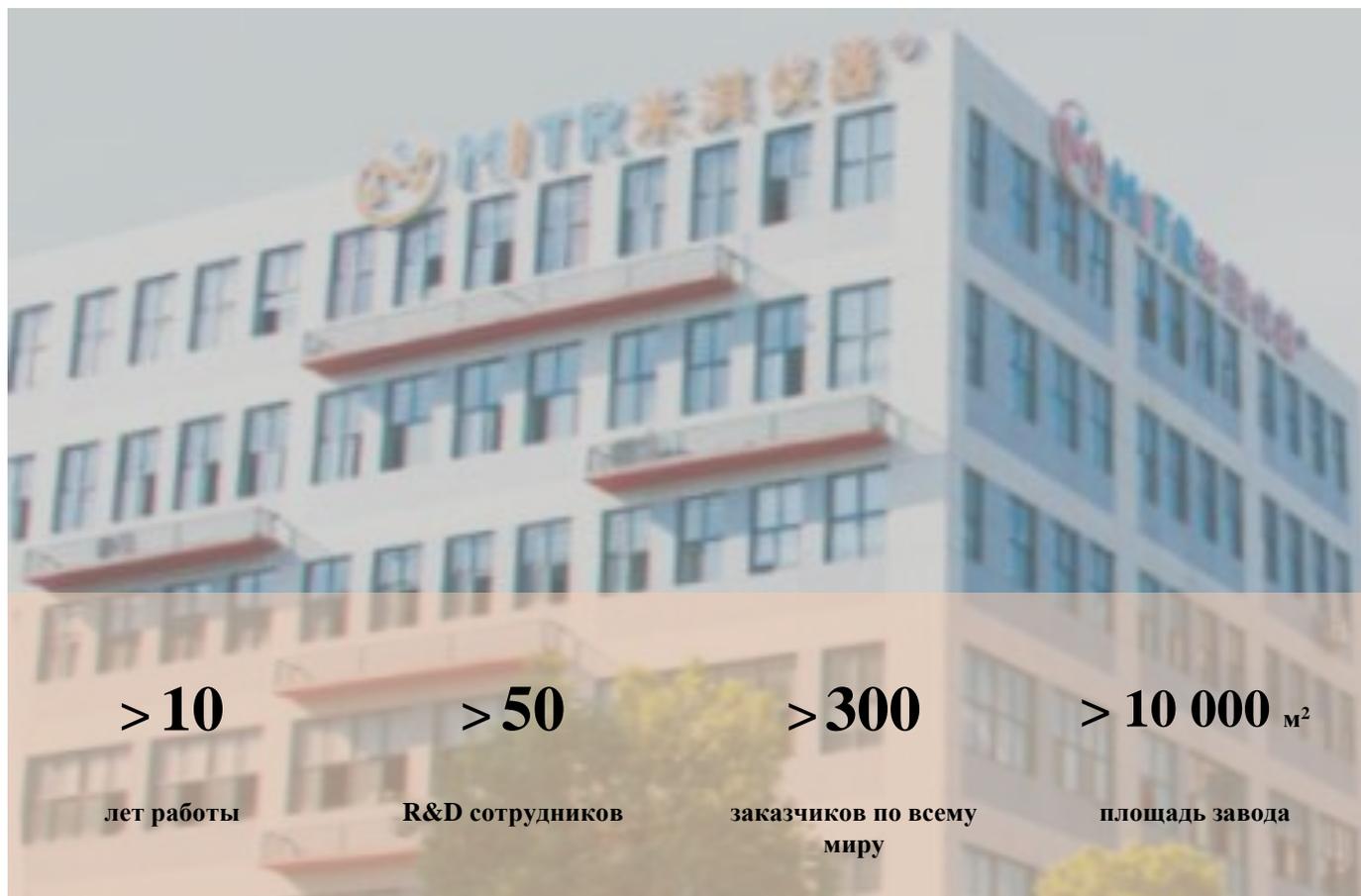

Компания Changsha Mitr Instrument Equipment основана в 2007 году и является известным китайским производителем, специализирующимся на лабораторном научно-исследовательском оборудовании.

Компания осуществляет научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и производственную деятельность, которая базируется на разработках и инновациях Центрального Южного Университета, являющегося одной из основных исследовательских площадок металлургической промышленности Китая. Changsha Mitr Instrument Equipment активно сотрудничает с известными университетами Китая, такими как Хунаньский университет, Шанхайский университет Цзяо Тонг и др.



Лабораторные щековые дробилки

Лабораторные щековые дробилки относятся к передовому оборудованию для обработки материалов, являются одним из основных видов обработки материалов. **Щековая дробилка MITR** небольшая по габаритным размерам, простая и удобная в управлении, имеет простую конструкцию и панель управления с ЖК-экраном.

Расстояние между дробящими плитами отображается на экране дисплея.

Подходит для материалов диаметром не более 30 мм. После дробления размер материал варьируется в диапазоне 1-10 мм.



Области применения

Подвижная щековая плита периодически прижимается к неподвижной плите, и материалы, находящиеся между ними, сжимаются и дробятся до получения тончайшего материала толщиной 1 мм.

Щековая дробилка используется в различных областях: рудной, металлургической, горнодобывающей, химической; при измельчении строительных, стойких, огнеупорных материалов, керамики и т.д.

Материал плит	Корунд	Марганцовистая сталь	Оксид циркония	Карбид вольфрама
Размер порта подачи		100×70 мм		
Размер частиц на входе		≤ 30 мм		
Размер частиц на выходе		1-10 мм		
Производительность		30 кг/ч		
Мощность		0,75 кВт		
Вес		88 кг		
Габаритные размеры		500×600×600 мм		



Панель управления с ЖК дисплеем



Порт приема материала



Порт подачи материала



Разъем для подключения воздушного компрессора



Changsha Mitr Instrument Equipment

Контакты в России:
АССА Лабораторные Системы
тел.: +7 499 490 02 72
e.mail: zapros@assa-group.ru
сайт: www.assa-group.ru

АССА



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634012, г. Томск, ул.
Елизаровых 53/2, оф. 804