



Лабораторные дозаторы Tacta

Производитель: Sartorius BIOHIT

Модель: Tacta

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2701

Команда Sartorius прислушалась к мнениям пользователей и, используя свой богатый опыт и результаты передовых исследований, создала модель дозатора Tacta с исключительно сбалансированным дизайном. Дозатор Tacta спроектирован таким образом, чтобы он мог удобно располагаться в руке, быть простым и удобным в работе. Все материалы, использованные для производства Tacta, были тщательно отобраны, а каждый компонент спроектирован в соответствии с высочайшими стандартами.

Идеально сбалансированное дозирование с Tacta:

- Удобно держать благодаря эргономичному корпусу
- Малые усилия при дозировании, а также нажатии на рычаг сбрасывания наконечника уменьшают риск возникновения офисного синдрома (WRULD)
- Уникальная система Sartorius Optilock делает удобными регулирование и фиксацию объема
- Контролируемое и мягкое сбрасывание благодаря новой технологии Sartorius Optiject
- Регулируемая калибровка для обеспечения точных результатов при дозировании различных видов жидкостей

- Легко очистить: дозатор состоит только из трёх частей
- Надёжные результаты даже после продолжительных периодов дозирования

Почувствуйте комфорт

Высшая степень эргономичности Tacta лежит в руке легко благодаря эргономичному дизайну корпуса и наличию упора для пальца. Дозатор Tacta прост в использовании, и его исключительно удобно держать в руках. Tacta облегчит вашу работу и защитит от синдрома запястного канала, даже когда вы выполняете дозирование продолжительное время в течение рабочего дня. Удобный дизайн корпуса и наличие упора для пальца позволяют комфортно расположить дозатор в руке, при этом исключается необходимость крепко его удерживать.

Малые усилия при дозировании, заборе и сбрасывании наконечника

При использовании Tacta усилия, необходимые для полного цикла дозирования: начиная с установки наконечника, дозирования и, наконец, сбрасывания наконечника, — чрезвычайно малы, и это защитит вас от офисного синдрома (WRULD). Функция Optiload с подпружиненными посадочными конусами дозатора, как в одноканальных, так и в многоканальных моделях, обеспечивает наконечнику идеальную



установку с минимальными усилиями. Следовательно, функция Optiload также осуществляет лёгкий сброс наконечника, что защитит вашу руку. Лёгкий сброс наконечника становится существенно проще благодаря мягкой технологии поуровневого сброса наконечника Sartorius Optiject, которая делает отсоединение наконечника плавным и контролируемым.

Большой чёткий дисплей

Большой, удобный для чтения дисплей поможет вам рассмотреть все четыре цифры установленного объёма с расстояния, не напрягая глаза. Объём легко читается, даже если дозатор расположен под углом, что исключает неудобное положение головы во время работы.



Регулируемая калибровка

Чтобы отрегулировать дозатор Tacta для работы с разными типами жидкостей, используется калибровочный ключ. Шкала регулировки отображает градус регулировки. Отметив это значение для конкретной жидкости, вы сможете



вернуться к этим установкам в любое время. Простота регулируемой калибровки обеспечивает точные результаты для разных жидкостей.

Регулировка объёма

Используйте возможность Sartorius Optilock, чтобы предотвратить случайное изменение значения объёма во время дозирования. Либо нажмите и держите фиксатор механизма изменения объёма одной рукой и регулируйте объём другой рукой, а потом отпустите фиксатор либо только одной рукой сдвиньте фиксатор механизма изменения объёма вверх, отрегулируйте объём и сдвиньте фиксатор обратно вниз. Выберете, что вам удобнее.



Защитные фильтры


Сменные защитные фильтры, устанавливаемые в посадочный конус дозатора, предотвращают попадание жидкостей и аэрозолей внутрь дозатора и загрязнение его внутренних компонентов. Уникальный механизм сброса защитных фильтров позволяет удалять использованные фильтры без



непосредственного контакта с кожей человека. Защитные фильтры доступны для всех моделей Tacta с объёмом дозирования более 10 мкл и являются выгодным способом уменьшить загрязнение. Фильтры необходимо менять регулярно и при каждом случае набора сверх допустимого объёма.

Лёгкая очистка


Дозатор Tacta моется проще и быстрее аналогичных моделей конкурентов, существующих на рынке — для очистки он разбирается на три части, при этом дополнительного оборудования не требуется. Tacta можно стерилизовать паром или автоклавировать без специальных приготовлений, не разбирая. Также он обладает высокой устойчивостью к воздействию УФ и химически агрессивных веществ.

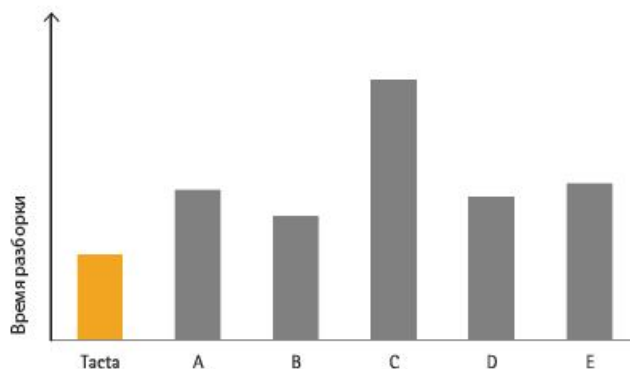

Доказанная точность

На следующем графике показано, как точность результатов дозирования при использовании различных дозаторов меняется со временем. Дозатор Tacta, все детали которого

спроектированы для комфортного дозирования, показал постоянные точные результаты на протяжении трёхчасового тестирования.

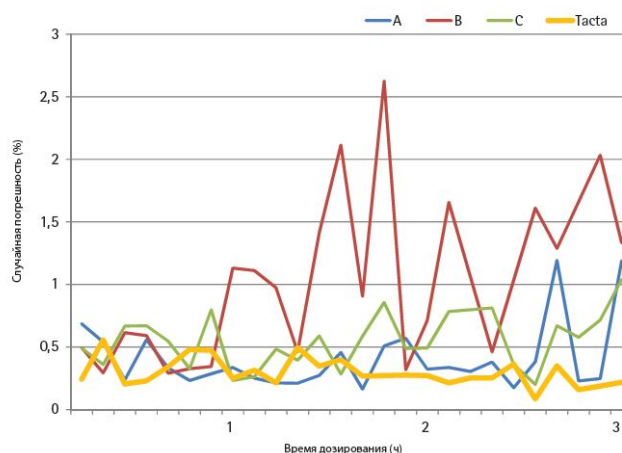

Наконечники для дозаторов Sartorius и сервис

Используйте дозаторы Tacta с оригинальными наконечниками Sartorius. Наши наконечники Optifit и SafetySpace с фильтрами разработаны так, чтобы идеальным образом подходить к дозаторам Tacta для достижения максимальной точности результатов. Также Sartorius предлагает услуги сервисной поддержки, ремонта и калибровки по всему миру. Для получения услуг свяжитесь с ближайшим сервисным центром или офисом Sartorius.

Код заказа	Каналы	Диапазон объёма, мкл	Защитные фильтры Standard Plus		Наконечники Optifit*, мкл	Наконечники с фильтром SafetySpace*, мкл
LH-729120	8	0,5-10	-	-	10	10
LH-729130	8	5-100	721008	721018	200, 350	120
LH-729140	8	30-300	721007	721017	350	300
LH-729220	12	0,5-10	-	-	10	10
LH-72923	12	5-100	721008	721018	200, 350	120

0						
LH-72924	12	30-300	721007	721017	350	300
0						

* Наконечники Low Retention доступны для объемов до 1 200 мкл.

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=2701

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.