


Аппликатор ручной Nanomat 4

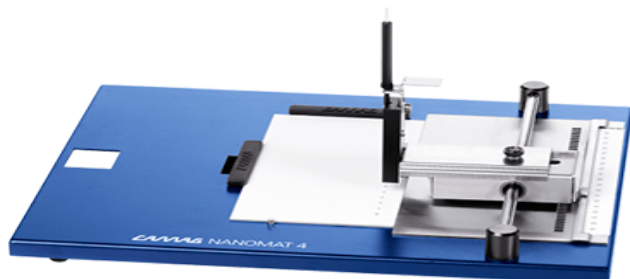

Производитель: Camag

Модель: Nanomat 4

<https://assa-group.ru/applikator-nanomat-4>

Инновационный аппликатор Nanomat 4 производства компании Camag разработан для высокоточного ручного нанесения проб на пластины для тонкослойной хроматографии (ТСХ) или высокоэффективной тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ). Использование устройства обеспечивает точное позиционирование пятен и предупреждает разрушение слоя сорбента.

Основные преимущества:

Инструменты представленные ниже предназначены для лабораторий, где к ТСХ анализу не предъявляют больших требований.

Одноразовые стеклянные капилляры: Одноразовые стеклянные капилляры для нанесения вручную объемом 0.5, 1, 2, 5 или 10 мкл. Поставляются в виалах по 100 шт.

Капилляры можно позиционировать с помощью шаблона (Multipurpose Spotting Guide). Капилляры можно вставить в Универсальный держатель вручную или с помощью Штатива для капилляров.

Штатив для капилляров: Штатив для капилляров служит для правильной установки Одноразовых капилляров в Универсальный держатель капилляров.

Nanomat 4 подходит для:

- Обычных ТСХ пластин формата до 20x20 см.
- ВЭТСХ пластин 10x10 см и 20x10 см.
- ТСХ и ВЭТСХ пластин на фольге до 20x20 см.

Капилляры на ленте загружаются в магазин капилляров. Имеются капилляры объемом 0.5, 1, 2, и 5 мкл. Каждый номинал капилляров должен устанавливаться в соответствующий ему магазин. Из диспенсера капилляр извлекается с помощью Универсального держателя капилляров, затем капилляр опускают в раствор пробы и затем устанавливают на держатель аппликатора Nanomat 4 для нанесения путем опускания головки держателя.

<https://assa-group.ru/applikator-nanomat-4>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.