www.assa-group.ru







## Планетарная мельница **Pulverisette 5 classic** line

Производитель: Fritsch Gmbh

Модель: Pulverisette 5

https://assa-group.ru/pulverisette-5

## Область применения:

Сверхтонкое измельчение до коллоидальной тонкости сухих лабораторных проб или твёрдых материалов в суспензии. Перемешивание и совершенная гомогенизация эмульсий или паст.


#### Особенности:

- Постоянное передаточное отношение опорного диска достигается за счёт использования зубчатого ременного привода
- Регулирование числа оборотов при помощи микропроцессора
- Цифровая индикация действительной скорости вращения опорного диска
- Режим реверсирования
- Программируемые продолжительности измельчения и перерывов, а также циклов измельчения; для кратковременного режима работы продолжительность измельчения может устанавливаться с точностью до секунды
- Фольговая клавиатура





634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru

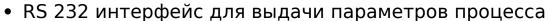

- Пружины, работающие под давлением газа, для простого открытия крышки измельчительной камеры
- Защитная блокировка крышки измельчительной камеры с системой наблюдения за наступлением состояния покоя
- Функция Power Save (режим экономии электроэнергии)
- Защита от перегрузки с автоматическим согласованием числа оборотов и индикации
- Все подшипники самосмазывающиеся
- Измельчительная камера с принудительной вентиляцией
- Надёжный корпус из ударопрочной пластмассы

### Технические характеристики:

Принцип действия ударом

твердый, среднетвердый, Оптимально подходит для типа

мягкий, материала

(примеры и таблицу материалов хрупкий, влажный

смотри страницу 8+9)

ACCU

Максимальная крупность для 10

загрузки в зависимости от

материала мм

Мин. объем пробы мл 1

450 / 900 Макс. объем пробы мл

< 1 Конечная крупность мкм

Процесс измельчения сухой/мокрый

Измельчение в среде защитного да

газа

да/RS232 Внешнее управление

Подключение системы GTM да

Число оборотов основного диска 50 - 400

или колебаний об/мин

Габариты (ШхГхВ), мм 580x670x570 100 или 120 Масса, кг

https://assa-group.ru/pulverisette-5



zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804 www.assa-group.ru

# Подберем оборудование конкретно под вашу + 7 495 215-06-01 задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.