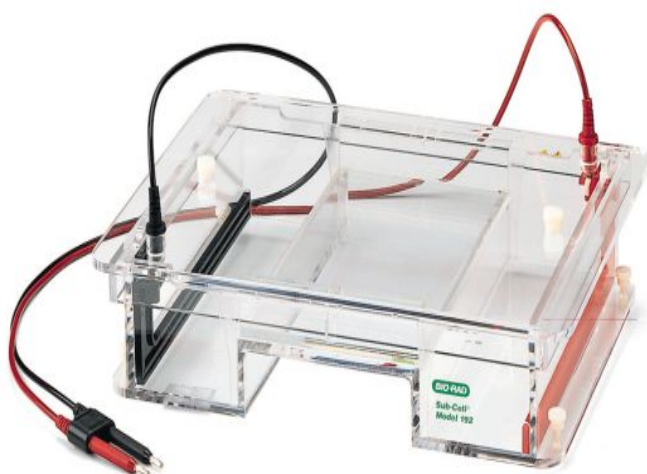




Камера для горизонтального электрофореза Sub Cell Model 96

Производитель: Bio-Rad

Модель: Sub Cell Model 96

<https://assa-group.ru/kamera-dlya-gorizontalnogo-elektroforeza-sub-cell-model-96>

Камеры серии Sub Cell Model 96 производства компании Bio-Rad специально разработаны для работы с большим количеством проб, что делает их удобными для анализа ПЦР-образцов при использовании планшетного формата. При использовании 51-луночной гребенки можно одновременно нанести на гель 48 образцов ДНК и 3 маркера, при использовании двух гребенок - до 96 образцов. При этом камеру Sub Cell Model 96 можно использовать с более короткими гелями и 26-луночной гребенкой.

УФ-прозрачная подложка камеры снабжена флуоресцентной линейкой, гель можно заливать как непосредственно на подложке с использованием наклонных заслонок, так и с помощью заливочного столика.

Камера снабжена портами для рециркуляции буфера.

Минимальная комплектация камеры:

- камера с защитной крышкой и комплектом проводов
- подложка для гелей
- две гребенки на 26 и 51 образец

Рекомендованная комплектация камеры:

- камера с защитной крышкой и комплектом проводов
- подложка для гелей
- две гребенки на 26 и 51 образец
- заливочный столик и/или упоры для заливки (зависит от комплектации)

Имеется широкий выбор подложек и других аксессуаров, включая препаративные гребенки и гребенки под многоканальные дозаторы.

Сопутствующее оборудование:

- источник питания PowerPac Basic

Размеры геля, см	25 x 10 или 25 x 15
Количество образцов	от 24 до 96
Объем буфера, мл	2000
Габариты, мм	300 x 290 x 90

<https://assa-group.ru/kamera-dlya-gorizontalnogo-elektroforeza-sub-cell-model-96>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

вопросах.