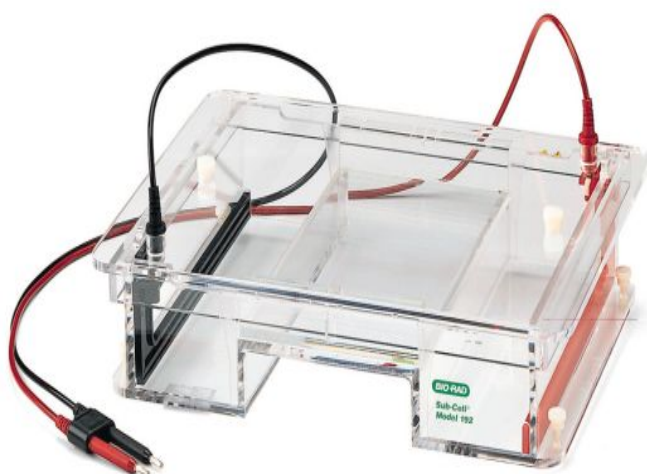




Камера для горизонтального электрофореза Sub Cell Model 192

Производитель: Bio-Rad

Модель: Sub Cell Model 192

<https://assa-group.ru/kamera-dlya-gorizontalnogo-elektroforeza-sub-cell-model-192>

Камера для горизонтального электрофореза Sub Cell Model 192 производства Bio-Rad обладает ещё большей вместимостью, чем камера Sub Cell Model 96. В камерах Sub Cell Model 192 можно работать с гелями длиной до 25 см и использовать 4 или более 51-луночных гребенки, что позволяет одновременно анализировать образцы с двух 96-луночных планшетов. Длинные гели и порты для рециркуляции буферов делают эти камеры весьма удобными для Southern и Northern анализа и разделения продуктов рестрикции космидных ДНК.

Подложки для геля и держатели гребенок камер Sub Cell Model 192 и Sub Cell Model 96 взаимозаменяемы. УФ-прозрачная подложка для геля снабжена флуоресцентной линейкой, гель можно заливать как непосредственно на подложке с использованием наклонных упоров, так и с помощью заливочного столика.

Минимальная комплектация системы:

- камера с защитной крышкой и комплектом проводов
- подложка для геля
- две гребенки на 26 и 51 образец

Рекомендованная комплектация системы:

- камера с защитной крышкой и комплектом проводов
- подложка для геля
- две гребенки на 26 и 51 образец
- заливочный столик и/или упоры для заливки (зависит от комплектации)

Имеется широкий выбор подложек и других аксессуаров, включая препаративные гребенки и гребенки под многоканальные дозаторы.

Сопутствующее оборудование:

- источник питания PowerPac Basic

Размеры геля, см	25 x 15 или 25 x 25
Количество образцов	от 24 до 192
Объем буфера, мл	3000
Габариты, мм	400 x 290 x 90

<https://assa-group.ru/kamera-dlya-gorizontalnogo-elektroforeza-sub-cell-model-192>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.